

Single-Use Instruments

one®

Moria シングルユース器具Oneシリーズ




正確なトーリック眼内レンズ挿入のための
ディスプレイブル器具シリーズ

Every time is the first time

Moria
JAPAN


トーリック眼内レンズ(IOL)を ポジショニングするための3点セット

One水平標準器付プリオペレーター#17249

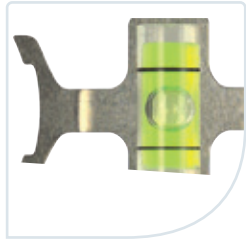

- 座位で水平位置をマークすることで、仰臥位時に眼球回旋による差異を測ることができます。
- 0から180°までの正確な軸調整を可能にした水平標準器です。
- 非侵襲の細いマーカー: 0.4mm x 3mm

Oneメンデスリング#17250

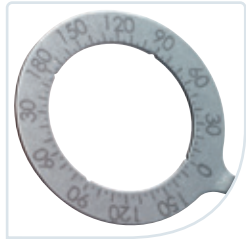

- 業界標準の内径12mm
- 5°刻みの目盛
- 0° 90° 180° 270°の4点にノッチがついています。
- 顕微鏡下での視認性向上のための表面艶消し仕上げをしています。
- このリングを正確にポジショニングすることで、ボワレスマーカーで正確にマーキングすることが可能です。

Oneボワレスマーカー#17251



- 正確に乱視軸上の2点をマークできるようにメンデスリングに誤差なくフィットします。
- 0.4mmの正確で極細のマークが可能です。
- 角膜の凸面にあうよう研磨されたマーカーチップを採用しています。

各製品包装: 10本/箱 (滅菌済)

医療機器認証番号: 223AFBZX00094000

Moria
JAPAN

株式会社 **モリア ジャパン**

〒113-0033
東京都文京区本郷3-24-2 イナミビル6F
TEL: 03-5842-6761 / FAX: 03-5842-6762
<http://www.moriajapan.com>

Manufactured by
Moria S.A.
www.moria-surgical.com