

Synergetics™ シャンデリアシリーズ



シナジェティクス「シャンデリア」シリーズの特徴

- ・ シャンデリア先端部は円錐形に加工され、磨き上げられており、広範囲に十分な輝度を確保します。
- ・ 先端部の長さを微調整することで患部の状況にあわせて明るさと照射範囲を調整することができます。
- ・ ファイバーに装着のストッパーによりシャンデリアをしっかりと固定し、密閉性を確保できます。
- ・ 専用アダプターを使用することで、PHOTON™以外にも、各社光源・手術装置に接続できます。


WS-56.54.27P 27ga Vivid シャンデリア (滅菌済) *

*Developed in cooperation with Yusuke Oshima, M.D., Ph.D.


- ・ 27ga/25gaに対応するシャンデリアです。
- ・ ファイバーストッパーはトロツカールに被せるタイプで、ファイバーに装着済みの補助棒で押し被せることでシャンデリアをしっかりと固定することができます。
- ・ トロツカールからの長さを調整することで照射範囲を調整でき、最大135°の照射幅を確保します。



ファイバーにストッパーがあるため、過度に眼内に押し込まれることを防止します。

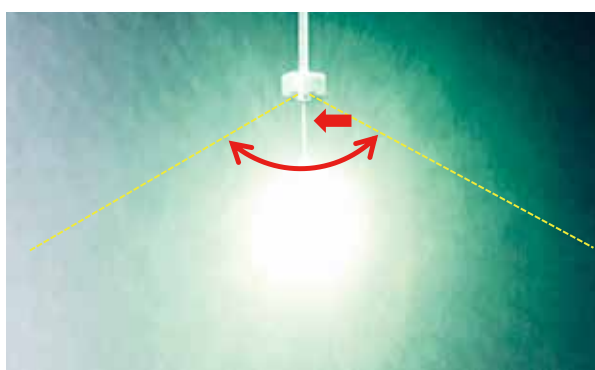

トロツカール先端からの長さを調整して照射範囲を変えることができます。(最大135°)

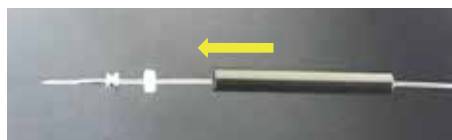

付属の補助棒でストッパーを押し込み、トロツカールに固定できます。



製品にはシャンデリアファイバー本体、オブチュレーター+トロツカール、コード位置決め用バンドが含まれています。



ストッパーは予めファイバー先端部に取り付けられています。

シャンデリアシリーズその他の品揃え

- ・ WS-56.54.25P 25ga Vivid シャンデリア (滅菌済)
- ・ WS-56.50.29P デュアルシャンデリア 29ga (滅菌済)

医療機器届出番号：13B1X00229000032



株式会社 **モリア ジャパン**

〒101-0041

東京都千代田区神田須田町1-12-3 アルカディアビル6F

TEL:03-6260-8309/FAX:03-6260-8310

<http://www.moriajapan.com>