

Single-Use Instruments



Moria シングルユース器具Oneシリーズ



Convenient, Precise, Sterile

モリアのフランス自社工場で製造される
シングルユース器具シリーズ

Moria

#17221X10 One ポン大鑷子 0.12mm (滅菌済)

※1



把持部 0.12mm



#17222X10 One 結紮鑷子 直 (滅菌済)

※1



把持部 4.0mm



#17225X10 One 結紮鑷子 カーブ (滅菌済)

※1



把持部 4.0mm



#17233X10 One 結紮鑷子 曲 (滅菌済)

※1



把持部 8.0mm



one® CCC用鑷子

#17237X10 One カプシュロレクシスピンセット 1.8mm 90° (滅菌済)

※1



先端部 90° コリドン氏タイプのCCC鑷子です。



#17252X10 One カプシュロレクシスピンセット 1.8mm 45° (滅菌済)

※1



先端部 45° クロザフォン氏タイプのCCC鑷子です。



#17223X10 One シンスキー氏 マニピュレーティング フック 曲 (滅菌済)

※2



90° 先端0.2mm



約123mm

#17228X10 One レスター氏 レンズ マニピュレーター 曲 (滅菌済)

※2



カラーボタン型



約123mm

#17230X10 One マニピュレーティング フック (滅菌済)

※2



先端 鈍



約118mm

#17229X10 One フェイコ チョッパー (滅菌済)

※2



かぎ爪 1.5mm



約123mm

#17242X10 One ドライスデール氏 マニピュレーター (滅菌済)

※2



約116mm

#17232X10 One ソートン氏 リング (滅菌済)

※3



内径 13mm



約118mm

※2 販売名: モリア One 眼球固定鉤 / 医療機器認証番号: 223AFBZX00094000

※3 販売名: モリア One 眼科用 鉤 / 医療機器認証番号: 223AFBZX00095000

Flat-Handle

← 有効長 → ← 110.2mm →



剛性を高めるための
強化スリーブ

使用中の術野の邪魔になりにくい
スリムなハンドル

360°-Handle

* 把持操作時に、チップの
位置ズレを防ぐ機構を採用

スムーズかつ操作性に優れた
軽量な一体成型ハンドル

ハンドル部: 109.5mm



* 剛性を高めるための補助シャフト
(※27Gのみに採用)



* ビジュアルマーク
刃先の向きを示します

※27Gの有効長: 強化スリーブ (約3.0mm) を含まないサイズとなります。

カラーコード



手術のニーズに合わせた2タイプのハンドル、6種類の先端デザイン

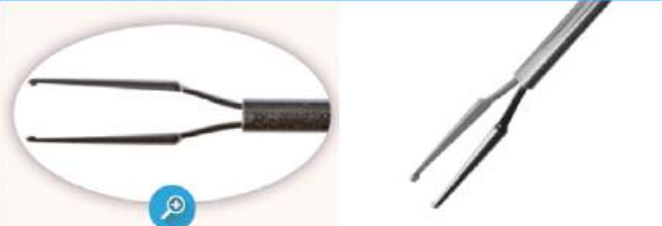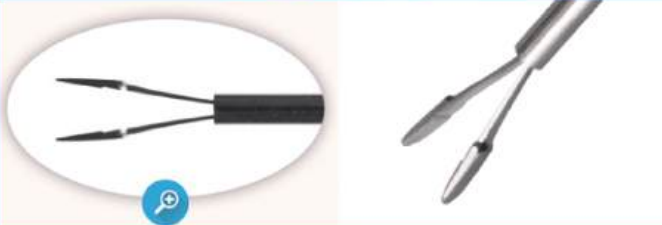ONE Retina ILM鉗子				ONE Retina エンドグリップ鉗子			
							
ILM(内境界膜)などの膜を掴んで剥がすための細い爪が付いています。				非対称構造により膜を剥がす際の接触面積が大きくなり、広い面でしっかりと把持できます。			
G	ハンドルタイプ	カタログ番号	有効長	G	ハンドルタイプ	カタログ番号	有効長
23G	Flat	17450/23	約35mm	23G	Flat	17451/23	約35mm
	360°	17456/23			360°	17457/23	
25G	Flat	17450/25	約33mm	25G	Flat	17451/25	約33mm
	360°	17456/25			360°	17457/25	
27G	Flat	17450/27	約30mm	27G	Flat	17451/27	約30mm
	360°	17456/27			360°	17457/27	
ONE Retina エッカード鉗子				ONE Retina ウルトラグリップ鉗子			
							
ILM(内境界膜)やERM(網膜上膜)をはじめとした、さまざまな種類の膜の剥離に対応する多用途鉗子です。				先端内側に微細な筋状の溝があり、膜をしっかりと把持できます。			
G	ハンドルタイプ	カタログ番号	有効長	G	ハンドルタイプ	カタログ番号	有効長
23G	Flat	17452/23	約35mm	23G	Flat	17453/23	約34mm
	360°	17458/23			360°	17459/23	
25G	Flat	17452/25	約32mm	25G	Flat	17453/25	約32mm
	360°	17458/25			360°	17459/25	
27G	Flat	17452/27	約30mm	27G	Flat	17453/27	約30mm
	360°	17458/27			360°	17459/27	
ONE Retina TANO エイシメトリカル鉗子				ONE Retina 米田式ラウンドエッジ鉗子 27G			
							
剥離面の視認性を考慮した非対称の鉗子です。				把持面を大きくし、丸みを帯びた楔形で、掴みやすさと見やすさ、安全性を考慮しました。米田一仁先生と共同開発のデザインです。			
G	ハンドルタイプ	カタログ番号	有効長	G	ハンドルタイプ	カタログ番号	有効長
23G	Flat	17454/23	約34mm	23G			
	360°	17460/23					
25G	Flat	17454/25	約31mm	25G			
	360°	17460/25					
27G	Flat	17454/27	約29mm	27G	Flat	17455/27	約29mm
	360°	17460/27			360°	17461/27	

One® DSAEK (角膜内皮移植手術) 用器具

#17302X5 One プライス氏 フック (滅菌済)

※3

販売単位: 5本



#17303X5 One ストリッパー スパーテル 90° (滅菌済)

※3

販売単位: 5本



#17300X5 One ブシン氏 グライドスパーテル (滅菌済)

※5

販売単位: 5本

挿入部幅 3.2mm~4.5mm



#17301X5 One ブシン氏 23G DSAEK 鑷子 (滅菌済)

※1


販売単位: 5本



#19187 One Use-Plus用
人工前房装置用リング (滅菌済)

※4

販売単位: 5個

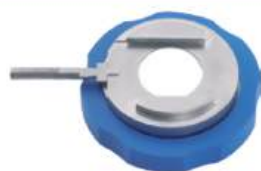

#19182 SU人工前房装置 (滅菌済)

※4

販売単位: 1個



#19180 CBSU用
人工前房装置用リング (滅菌済)

※4

販売単位: 5個



※3 販売名: モリア One 眼科用 鉤 / 医療機器認証番号: 223AFBZX00095000

※5 販売名: モリア One 眼科手術用スパーテル / 医療機器認証番号: 230AFBZX00019000

※1 販売名: モリア One 眼科用ピンセット / 医療機器認証番号: 223AFBZX00093000


※4 販売名: モリア マイクロケラトーム / 医療機器認証番号: 222AFBZX00087000

One® 角膜移植手術用トレパン・ドナーパンチ ※6

トレパンとパンチにはいずれも吸引用シリンジとチューブが付属します。

販売単位：1個

#17201D# One 真空トレパン（滅菌済）

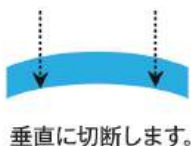

垂直に切断します。

- ・ シャープな対称型のブレードにより垂直な切断面が得られます。
- ・ 角膜輪部との接触面が大きく、しっかりと眼球に吸引固定できます。
- ・ センタリング指標が角膜に接触しているため、高さの差によるズレが生じません。
- ・ 切開深度は一回転につき250 μ m深くなるよう設計されています。
- ・ サイズ：7.00～9.00mmまで0.25mm刻み、9.50mm

#17202D# One アジャスタブル 真空トレパン（滅菌済）



- ・ シャープな対称型のブレードにより垂直な切断面が得られます。
- ・ 角膜輪部との接触面が大きく、しっかりと眼球に吸引固定できます。
- ・ センタリング指標が角膜に接触しているため、高さの差によるズレが生じません。
- ・ 切開深度は調整ダイヤルで50 μ mごとに調整が可能で、設定した深さで止まります。
- ・ サイズ：7.00～9.00mmまで0.25mm刻み、9.50mm

#17200D# One 真空ドナーパンチ（滅菌済）



ブレードの
断面イメージ図

- ・ シャープな対称型のブレードにより垂直な切断面が得られます。
- ・ 20個の吸引孔により繊細な角膜を均一に吸引します。
- ・ PK、DALK、DSAEK、DMEK用グラフト作製に使用できます。
- ・ サイズ：7.00～9.00mmまで0.25mm刻み、9.50mm

#17209D800 One Muraine氏 DMEK パンチ（滅菌済）



カットの
イメージ図

- ・ 深さ300 μ mまで切れ、円の対称位置に二つのヒンジが残るよう設計されています。
- ・ 20個の吸引孔により繊細な角膜を均一に吸引します。
- ・ サイズ：8.0mm

#17204 One 真空トレパン用 人工前房装置（滅菌済）



- ・ ONE真空トレパンと組み合わせて使用するシングルユースの人工前房装置です。
- ・ ドナー角膜とレシピエントを全く同じトレパンでカットすることを可能にします。
- ・ モリアACP等を使用して人工前房装置の内圧を調整して使用します。

#17539x20 One 強膜マーカー (滅菌済)



- ・硝子体注射において眼球を固定し、注射の位置決めをするためのマーカーです。

one® トーリックIOL用器具

#17249X10 One ポジショニングマーカー 水平標準器付 (滅菌済)



- ・座位で水平軸をマーキングするためのプリオペマーカーです。
- ・仰臥位になった際の眼球の回旋による誤差を補正するのに役立ちます。

#17250X10 One メンデスリング (滅菌済)



- ・内径12mmで、5°刻みに目盛がついています。

#17251X10 One ボワレスマーカー (滅菌済)



- ・メンデスリングにぴったりとフィットし、正確に2点をマーキングできます。

one® 開瞼器

#17231X10 One アジャスタブル 開瞼器 (滅菌済)



- ・プレートタイプのため、睫毛がはみ出しにくい構造です。
- ・ネジを回転させることで、開瞼幅を調整できます。
- ・PP樹脂製です。

#17227X10 One クラッツ氏 開瞼器 (滅菌済)



- ・汎用性があり経済的な1mm径のワイヤ開瞼器です。

#17537X10 One ワイヤー 開瞼器 (滅菌済)



- ・汎用性があり経済的なワイヤ開瞼器です。
- ・指で操作しやすいようタブが付いています。

#17538X10 One ワイヤー 開瞼器 ソリッドブレードタイプ (滅菌済)



- ・指で操作しやすいタブ付きのステンレス製開瞼器です。
- ・プレートタイプのため、睫毛がはみ出しにくい構造です。