

# Moria

- ※1 販売名:ステラリス  
医療機器承認番号:22100BZX00788000
  
- ※2 販売名:IAVPsパック PC  
医療機器承認番号:22400BZX00010000
  
- ※3 販売名:IAVPsパック アンテリア  
医療機器承認番号:23000BZX00206000
  
- ※4 販売名:IAVPsパック デュアルインフュージョン  
医療機器届出番号:13B1X00001000034
  
- ※5 販売名:超音波ニードル  
医療機器承認番号:21700BZY00096000
  
- ※6 販売名:バイポーラコード  
医療機器届出番号:13B1X00001000027
  
- ※7 販売名:単回使用眼科用バイポーラ電極  
医療機器認証番号:303AGBZX00053000
  
- ※8 販売名:眼科用バイポーラ電極  
医療機器認証番号:220AGBZX00240000
  
- ※9 販売名:眼科用I/Aハンドピース TMT  
医療機器届出番号:13B1X00001000017
  
- ※10 販売名:眼科用I/Aハンドピース SG  
医療機器届出番号:13B1X00001000016
  
- ※11 販売名:エンドイルミネーター  
医療機器認証番号:305AGBZX00025000

【製造販売元】  
ボシュロム・ジャパン株式会社

【販売代理店】  
株式会社 **モリア ジャパン**  
〒101-0041  
東京都千代田区神田須田町1-12-3 アルカディアビル6F  
TEL:03-6260-8309/FAX:03-6260-8310 <https://www.moriajapan.com>

B+L2021001-6

# Stellaris Elite™

Vision Enhancement System



BAUSCH+LOMB Moria



**BL11145 ※1**  
**ステラリス Elite (Anterior)**

**BL14455 ※1**  
**ステラリス Elite (Combo)**

**BL15455 ※1**  
**ステラリス Elite (Combo)**  
**\*レーザーモジュール搭載**

**BL2394 ※1**  
**フットコントロール**

**フットコントロールアクセサリ ※1**

BL4390 バッテリー  
BL4391 充電器  
BL4393 充電クレードル  
BL4394 パワーケーブル




**BL4363**  
ゼロレベルボトルハンガー ※1



**BL4364**  
トレイアダプター ※1



**BL3320** キセノンランプモジュール ※1  
**BL3321** キセノン水銀ランプモジュール ※1

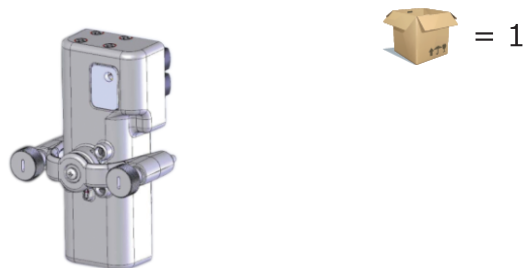

**BL3170**  
フェイコハンドピース ※1



**Adaptive Fluidics™ Pack**

STERILE ② = 6

**BL5115-1**  
**Adaptive Fluidics™ プレミアムパック ※3**

A. 2.4mmスリーブ (2個入り)  
B. ブルー 2.0MICS ニードル  
C. マイクロメッシュフィルター



**BL5115-2**  
**Adaptive Fluidics™ スタンダードパック ※3**

A. 2.4mmスリーブ (2個入り)  
B. ブルー 2.0MICS ニードル




**BL5115-4**  
**Adaptive Fluidics™ ベーシックパック ※3**

A. MICS スリーブ (2個入り)



上記すべてのパックにこれら製品が含まれています。

1. AFI チューブ付きカセット
2. メイヨートレイ、スクリーン、リモコン用カバー
3. プラグ
4. テストチャンバー
5. ニードルレンチ
6. ボトルスパイク

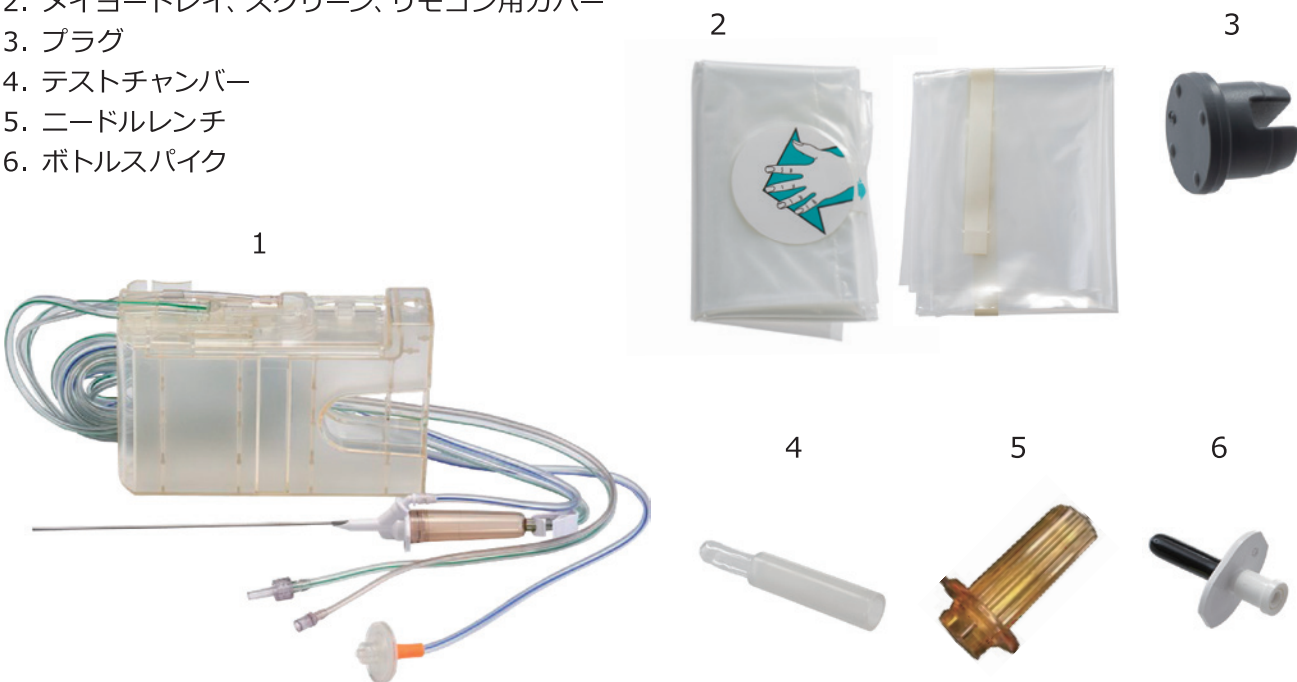

Combined Packs with Bi-Blade®

STERILE ②  = 6

SE5523MVB / SE5523WVB ※2

23G Combined Pack

- A. 23G バイブレード ビトレクトミーカッター
- B. 23G イルミネーター
- \*Midfield (MVB) / Diffuse Wide Angle (WVB)
- C. 23G バルブESAトロッカーシステム
- D. 23G プラグ



SE5525MVB / SE5525WVB ※2

25G Combined Pack

- A. 25G バイブレード ビトレクトミーカッター
- B. 25G イルミネーター
- \*Midfield (MVB) / Diffuse Wide Angle (WVB)
- C. 25G バルブESAトロッカーシステム
- D. 25G プラグ



SE5527MVB / SE5527WVB ※2

27G Combined Pack

- A. 27G バイブレード ビトレクトミーカッター
- B. 27G イルミネーター
- \*Midfield (MVB) / Diffuse Wide Angle (WVB)
- C. 27G バルブESAトロッカーシステム



Posterior Packs with Bi-Blade®

STERILE ②  = 6

SE5423MVB / SE5423WVB ※2

23G Posterior Pack

- A. 23G バイブレード ビトレクトミーカッター
- B. 23G イルミネーター
- \*Midfield (MVB) / Diffuse Wide Angle (WVB)
- C. 23G バルブESAトロッカーシステム
- D. 23G プラグ



SE5425MVB / SE5425WVB ※2

25G Posterior Pack

- A. 25G バイブレード ビトレクトミーカッター
- B. 25G イルミネーター
- \*Midfield (MVB) / Diffuse Wide Angle (WVB)
- C. 25G バルブESAトロッカーシステム
- D. 25G プラグ



SE5427MVB ※2

27G Posterior Pack

- A. 27G バイブレード ビトレクトミーカッター
- B. 27G Midfield イルミネーター
- C. 27G バルブESAトロッカーシステム



BL5500 ベーシックパック (同時手術用) ※2

上記すべてのパックにこれら製品が含まれています。


- 1. AFI チューブ付きカセット
- 2. 吸引ライン
- 3. インフュージョンライン
- 4. メイヨートレイ、スクリーン、リモコン用カバー
- 5. プラグ
- 6. テストチャンバー
- 7. オス型ルアーカプラー
- 8. MICS スリーブ (2個入り)
- 9. プライミング用カップ
- 10. ニードルレンチ
- 11. ボトルスパイク
- 12. 三方活栓



BL5400 ベーシックパック (硝子体手術用) ※2

上記すべてのパックにこれら製品が含まれています。

- 1. AFI チューブ付きカセット
- 2. 吸引ライン
- 3. インフュージョンライン
- 4. メイヨートレイ、スクリーン、リモコン用カバー
- 5. プラグ
- 6. プライミング用カップ
- 7. オス型ルアーカプラー
- 8. ボトルスパイク
- 9. 三方活栓

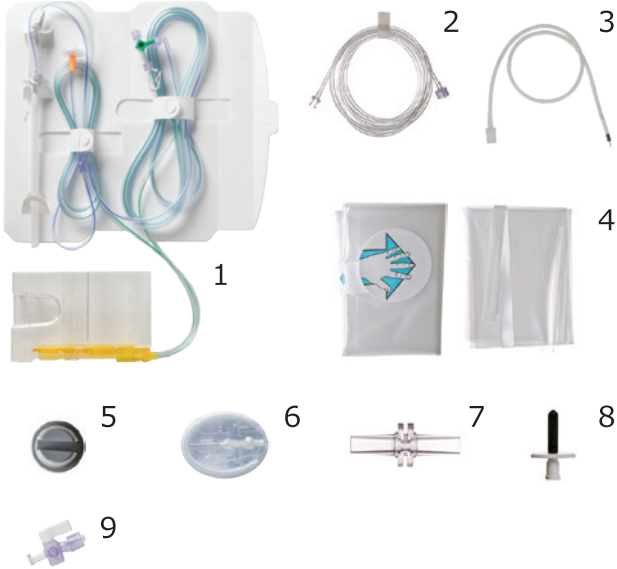

Accessories

Phaco Sleeves

\*各2個入り／1パック STERILE   = 12

BL3118 1.8mm スリーブ ※3



BL3124S 2.4mm スリーブ ※3



DP5531 2.2mm スリーブ  
Micro Flow ® 用スリーブ ※3



DP5511  
シンチップ用スリーブ ※3



Phaco Tips

リユース ※5

 = 6

BL3318 MICS ニードル 1.8 ストレート

BL3318A MICS ニードル 1.8 アングル 30°

DP8430 シンチップ用ニードル 20G (30D)

BL3420 MICSニードル2.0



BL3420A MICSニードル2.0 アングル



シングルユース ※3 STERILE   = 6

BL3318S MICS ニードル 1.8 ストレート  
(ニードルレンチ付)



BL3318AS MICS ニードル 1.8 アングル 30°  
(ニードルレンチ付)



BL3420S MICSニードル2.0 (ニードルレンチ付)

Bipolar

リユース

CX9400  
バイポーラコード ※6



S2050 1 バイポーラ 電極 直 (ピンセットタイプ) ※8



S2050 10A バイポーラ 電極 曲 (ピンセットタイプ) ※8



シングルユース


E7924 バイポーラ電極 25G 直  
(ペンシルタイプ) テーパード、2ピン ※7



E7933 バイポーラ 電極 27G 直  
(ペンシルタイプ) ※7



BL5280 デュアルインフュージョンキット ※4

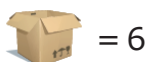

I/A Handpiece & Tips

BL3160 マルチI/A ハンドピース ※9



DP9731 マルチI/Aチップ 0.3mm 直  
シリコンスリーブ ※9



DP9733 マルチI/Aチップ 0.3mm 45D  
シリコンスリーブ ※9



85761 I/A ハンドピース 0.3mm 直 ※10  
(シリコンハンドルとチップー体型)



85951 I/A ハンドピース 0.3mm 曲 ※10



Vitrectomy Cutters

\*A-Vitとして使用する際は、別途 **BL3190** アンテリアビトロクトミーアダプターキット (※3) が必要です。

STERILE   = 6

BL5620 20G ※2



BL5612 20G ※2



BL5623S 23G ※2



BL5625S 25G ※2



BL5627S 27G ※2

Cutter for Stellaris Elite™

STERILE ②  = 6

**SE5623B** ※2  
Stellaris Elite™ Combo用  
23G バイブレードビトレクトミーカッター



**SE5625B** ※2  
Stellaris Elite™ Combo用  
25G バイブレードビトレクトミーカッター



**SE5627B** ※2  
Stellaris Elite™ Combo用  
27G バイブレードビトレクトミーカッター



Valved Trocars

STERILE ②  = 6

**BL5281** ※2  
23G ESA トロッカー・カニユーラ (3本入り)  
(インフュージョンカニユーラ・プラグ付)



**BL5282** ※2  
25G ESA トロッカー・カニユーラ (3本入り)  
(インフュージョンカニユーラ・プラグ付)



**BL5240** ※2  
27G ESA トロッカー・カニユーラ (3本入り)  
(インフュージョンカニユーラ付)



**BL5283** ※2  
23G ESA トロッカー・カニユーラ (1本入り)

**BL5285** ※2  
25G ESA トロッカー・カニユーラ (1本入り)

**BL5241** ※2  
27G ESA トロッカー・カニユーラ (1本入り)

Mid-Field イルミネーター

STERILE ②  = 6

**BL5823M** 23G ※11



**BL5825M** 25G ※11



**BL5827M** 27G ※11



Diffuse Wide Field イルミネーター

STERILE ②  = 6

**BL5823D** 23G ※11



**BL5825D** 25G ※11



**BL5827D** 27G ※11



Wide Angleイルミネーター

STERILE ②  = 6

**BL5820** 20G ワイドアングル イルミネーター ※11

**BL5823** 23G ワイドアングル イルミネーター ※11

**BL5825** 25G ワイドアングル イルミネーター ※11

Adjustable Chandelier

STERILE ②  = 5

**BL5234** 23G ※11

**BL5235** 25G ※11



Universal Viscous Fluid Control Pack

BL7600 ※2

STERILE





= 6



パックにはこれら製品が含まれています。

- ① バレル
- ② ブランジャー
- ③ ピストン
- ④ キャップ
- ⑤ VFIカニューレ (23G, 25G)
- ⑥ ハードカニューレ
- ⑦ エクストラクションカニューレ
- ⑧ VFチューブ
- ⑨ VFアダプター



Laser Safety Filters


BL3236 eye セーフティーフィルター (Zeiss/Fixed) ※1

BL3240 eye セーフティーフィルター (Zeiss) ※1

BL3237 eye セーフティーフィルター (Leica/Fixed) ※1

BL3247 eye セーフティーフィルター (Leica 4-way/Fixed) ※1

BL3241 eye セーフティーフィルター (Leica/Wild) ※1

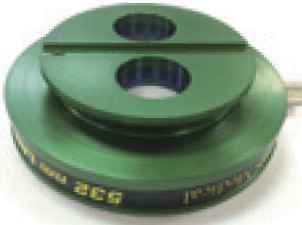



= 1

仕様

販 売 名 : ステラリス 医療機器承認番号 : 22100BZX00788000

一 般 的 名 称 : 白内障・硝子体手術装置 \*  
眼科用レーザー光凝固装置 \*

医療機器区分 : 高度管理医療機器 \* ‡  
特定保守管理医療機器 \* ‡  
設置管理医療機器 \*

製 品 番 号 : BL14455 (Stellaris Elite Combo) \*  
BL15455 (Stellaris Elite Combo with integrated laser) \* ‡  
BL11145 (Stellaris Elite Anterior) \*

|    |      |                                                   |
|----|------|---------------------------------------------------|
| 吸引 | 吸引制御 | ロータリーベーンポンプシステム *Anterior<br>ベンチュリーポンプシステム *Combo |
|    | 吸引圧  | 0～660mmHg (I/A及びVITモード)<br>10～660mmHg (USモード)     |

|    |            |                  |
|----|------------|------------------|
| 灌流 | 重圧落下方式     | 30～140cm (IVボール) |
|    | 加圧方式 (AFI) | 0～150mmHg        |

|      |            |            |
|------|------------|------------|
| フェイコ | 発振方式       | ピエゾエレクトリック |
|      | 発振周波数      | 28.5KHz    |
|      | 最大出力       | 35W (900Ω) |
|      | パルス超音波モード  | 1～250pps   |
|      | Duty Cycle | 5～95%      |

|         |        |                                             |
|---------|--------|---------------------------------------------|
| 硝子体カッター | 切除方式   | 空気駆動ギロチン方式                                  |
|         | カットレート | 30～2,500cpm *Anterior<br>30～7,500cpm *Combo |

|             |          |                     |
|-------------|----------|---------------------|
| 眼内照明 *Combo | 光源ランプ1   | キセノンランプ             |
|             | 光源ランプ2   | キセノン水銀ランプ           |
|             | 出力 (光束量) | 18lm以上 (ライト パイプ先端部) |

|       |      |             |
|-------|------|-------------|
| バイポーラ | 最大出力 | 7.5W (100Ω) |
|       | 周波数  | 1MHz        |
|       | 出力範囲 | 0～100%      |
|       |      |             |

|            |      |                  |
|------------|------|------------------|
| フットコントローラー | 稼働方式 | 無線 (10m範囲) or 有線 |
|            |      |                  |

|             |      |                      |
|-------------|------|----------------------|
| リモートコントローラー | 稼働方式 | 赤外線 (ディスプレイから4.5m以内) |
|             |      |                      |

|      |      |                               |
|------|------|-------------------------------|
| 定格電源 | 電源入力 | 100 - 240VAC, 50/60Hz, 1000VA |
|      |      |                               |

|        |     |                                                  |
|--------|-----|--------------------------------------------------|
| 重量・サイズ | 重量  | 114kg                                            |
|        | サイズ | 457mm (W) X 457mm (D) X 1220mm (H)<br>(IVボールを除く) |
|        |     |                                                  |

|      |           |                        |
|------|-----------|------------------------|
| レーザー | レーザー      | ダイオード励起半波長ソリッドステートレーザー |
|      | レーザー波長    | 532nm                  |
|      | レーザー出力    | 50～2000mW              |
|      | 冷却方式      | 空冷                     |
|      | 照射時間      | 0.01～3.0秒              |
|      | インターバル時間  | 0.01～3.0秒              |
|      | レーザーモード   | 連続発振、シングルショット          |
|      | 照射光レーザー   | ダイオード                  |
|      | 照射光レーザー波長 | 635nm、赤色               |
|      | 照射光レーザー出力 | 1mW未満                  |